

# Melgisorb® Ag

Høyabsorberende antimikrobiell alginatbandasje



#### Sølvholdig alginat


- Vedvarende antimikrobiell effekt
- In vitro forsøk viser antimikrobiell virkning fra 4 timer opp til 14 dager

#### Alginat med CMC-fibre


- God absorpsjon – til kraftig væskende sår
- Beregnet til overfladiske og dype sår
- Kan fjernes i ett stykke

- Svært god absorpsjon for svært væskende og dype sår
- Gir vedvarende antimikrobiell effekt
- Høy fiberstyrke muliggjør fjerning i ett stykke


## Hvordan bruke Melgisorb® Ag

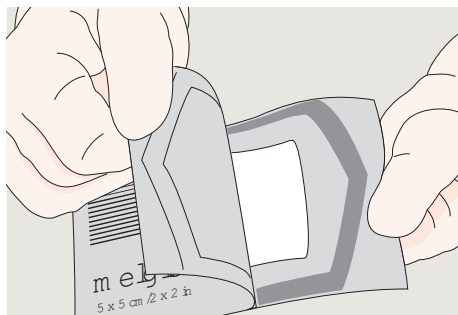

1. Debrider og skyll såret og den omkringliggende huden i henhold til standard prosedyre. Velg en størrelse av Melgisorb® Ag som er noe større enn såret. Klipp eller brett bandasjen slik at den passer til såret.

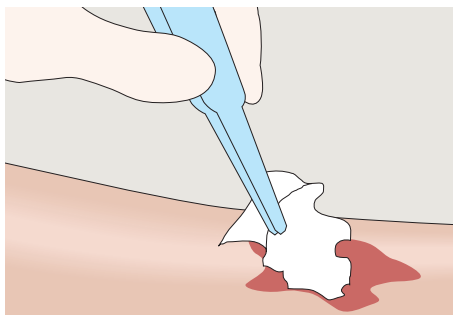

2. Fyll forsiktig i dype sår og pass på at kantene på bandasjen ikke ligger utover sårkanten. Appliser kun i sårsengen.

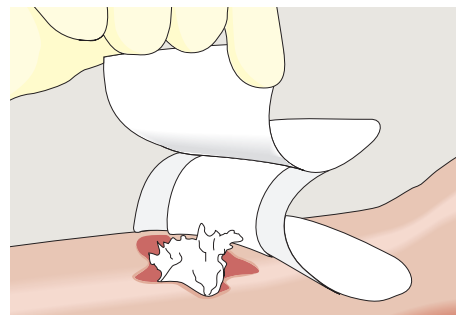

3. Dekk og beskytt Melgisorb Ag med en sekundærbandasje.

## Bruksområder

Melgisorb Ag egner seg til behandling av moderat til svært væskende sår, som for eksempel:

- postoperative kirurgiske sår
- traumatiske sår
- leggsår
- trykksår
- diabetiske fotsår
- transplantat- og donorsteder
- delhudsbrannskader

Dette produktet kan brukes under kompresjon. Ettersom produktet inneholder alginat, kan det hjelpe med å kontrollere mindre blødninger i overfladiske sår. Melgisorb Ag kan brukes til behandling av infiserte sår eller sår der det er økt risiko for infeksjon (under medisinsk tilsyn av helsepersonell).

Melgisorb Ag kan ligge på i opptil 7 dager. Skiftefrekvensen avhenger av sårets tilstand og mengde sårveske. Til å begynne med kan det være nødvendig å skifte bandasje hver 24. time. Hvis såret virker tørt, mett bandasjen med steril saltoppløsning før fjerning. Fjern bandasjen forsiktig fra sårsengen. Irriger sårsengen i samsvar med lokale retningslinjer før påføring av en ny bandasje.

## Kontraindikasjoner

Melgisorb Ag har ingen indikasjoner for bruk på:

- personer med en kjent følsomhet for alginater eller sølv
- for å kontrollere kraftige blødninger
- for direkte påføring på tørre eller lite væskende sår

For detaljert informasjon, vennligst se pakningsvedlegget



## Melgisorb Ag sortiment (sterile enhetspakninger)

Art. nr.	Størrelse i cm	Antall i eske	Antall i kartong
256055	5 x 5	10	100
256105	10 x 10	10	100
256155	15 x 15	10	100
256205	20 x 30	5	50
256605	3 x 44	10	100

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Tlf: 22 70 63 70.  
The Mölnlycke and Melgisorb trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC1061909

  
**Mölnlycke®**