

Mepilex[®] Border Heel

Gebruiksaanwijzing




Mepilex[®] Border Heel


Mölnlycke[®]

Gebruiksaanwijzing

Maak de risicozone / het wondgebied klaar:

Reinig de huid. Droog de omliggende huid zorgvuldig. Zorg dat de huid vrij is van dimethicone, barrièrecrèmes en zachtmakers. Het gebruik van een huidbarrière onder het verband is niet nodig.

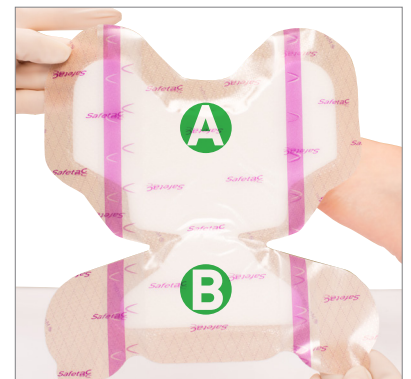

1. Droog het wondgebied zorgvuldig nadat de huid/wond gereinigd is. Verwijder vervolgens het middelste schutblad en breng het verband onder de hiel naar de gewenste plaats.



2. Breng kleeflaag 'A' (zie illustratie hierboven) aan op de achterste zones van de hiel/Achillespees, waarbij het smalste deel van het verband zich onderaan de hiel bevindt. Niet uittrekken.



3. Verwijder het schutblad van een van de flappen in zone 'A' (enkeelflappen). Breng het verband aan en strijk glad. Herhaal aan de andere zijde. Niet uittrekken.



4. Breng kleeflaag 'B' (zie illustratie hierboven) voorzichtig aan onder het voetzoolvlak. Niet uittrekken.



5. Verwijder het schutblad van een van de flappen in zone 'B' (flappen met tabs). Breng het verband aan en strijk glad. Herhaal aan de andere zijde. Niet uittrekken.



6. Strijk het verband glad, zodat het hele oppervlak tegen de huid komt.

Opm

Bij klinische tekenen van infectie mag Mepilex® Border Heel verder gebruikt worden als de infectie adequaat behandeld wordt.
Gebruik het verband niet bij een droge, intacte korst.

Tips

- **Denk aan 'A'** van 'Achilles' om te onthouden hoe u het verband correct moet aanbrengen
- Breng het verband aan op een schone, droge huid
- Rek het verband tijdens het aanbrengen niet uit
- Breng een steunkous aan als de patiënt ambulant is--zo blijft het verband ook beter op zijn plaats
- Overweeg het gebruik van Tubifast® of andere buisverbanden als extra steun voor heel onrustige patiënten of voor degenen bij wie het verband vroegtijdig loskomt: het verband is ontworpen met de bedoeling de huid zacht te behandelen

Herpositionering van het verband ter voorkoming van decubitus



1. Trek zachtjes aan de tabs om het verband van de huid los te maken.



2. Maak het verband verder los van de huid met de tabs, tot de huid blootligt voor controle.



3. Controleer de huid terwijl u het verband op de proximale rand van 'A' houdt (zie afbeelding).



4. Breng het schuim en de rand van het verband terug aan. Zorg dat de flappen met de tabs over de enkelflappen komen




5. Breng het verband terug aan op zijn oorspronkelijke plaats, waarbij u ervoor zorgt dat de rand intact en vlak is.



6. Strijk het verband glad, zodat het hele oppervlak tegen de huid komt.

7. Breng de steunkous terug aan als u die gebruikt, vooral voor ambulante patiënten.

Hoe Mepilex® Border Heel werkt

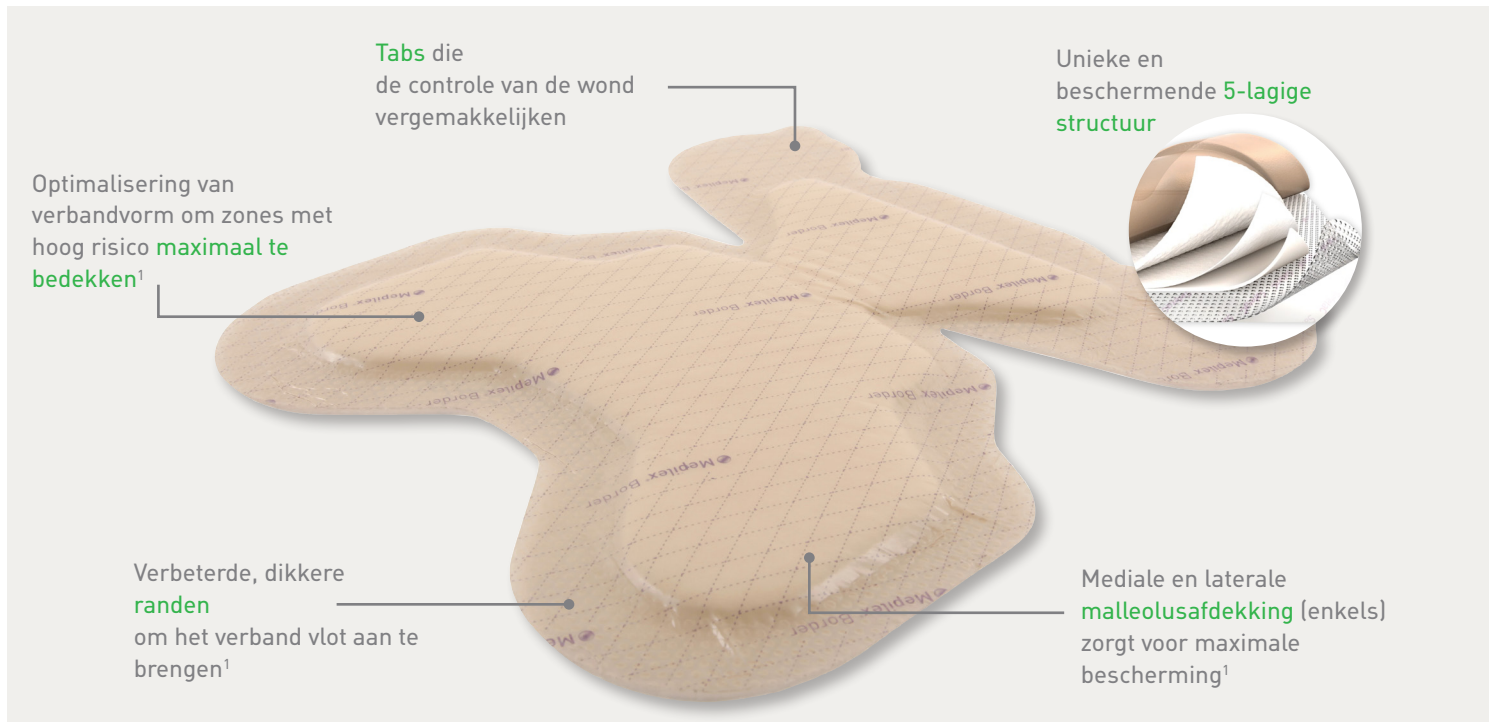

Voordelen

- ✓ Tabs om de controle van de huid te vergemakkelijken
- ✓ Iets dikkere rand om het verband beter te kunnen aanbrengen en op zijn plaats te houden
- ✓ Geschikt voor hiel – hoeft niet geknipt of aangepast te worden
- ✓ Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels^{5, 6, 7}
- ✓ Bedekt mediale en laterale malleolus voor maximale bescherming
- ✓ Kan verschillende dagen op zijn plaats blijven
- ✓ Kan worden geherpositioneerd zonder zijn klevende eigenschappen te verliezen
- ✓ Absorbeert matige tot grote hoeveelheden exsudaat⁸

Preventie

Mepilex® Border Heel is ontwikkeld om op de hiel te passen en de zones rond de hiel, achillespees en bilaterale malleoli te beschermen. Bij **preventief gebruik*** zal het helpen de huid te beschermen tegen beschadigingen door druk, schuif- en wrijfkracht². De **Safetac®** technologielaag beschermt de huid door het verband op zijn plaats te houden en door wrijf- en schuifkracht op het raakvlak met de patiënt te beperken².

Mepilex® Border Heel assortiment[‡]

Z-index nummer	Productcode	Afmetingen	Stuks/RET
16533364	282750	22 x 23 cm	6

‡ Steriel en afzonderlijk verpakt

* Bij gebruik in het kader van een algemeen preventieprotocol

Behandeling

Mepilex® Border Heel absorbeert en houdt exsudaat efficiënt vast³ en behoudt een vochtige wondomgeving. De **Safetac®** laag sluit de wondranden af, voorkomt dat exsudaat wegsijpelt naar de omliggende huid en minimaliseert zo het risico op maceratie⁴. De **Safetac®** laag zorgt er bovendien voor dat het verband vervangen kan worden zonder de wond of omliggende huid te beschadigen⁵ of de patiënt meer pijn te bezorgen⁶.

Referenties: 1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care [GMCS-2017-058] 2017. 2. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012. 3. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 4. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008. 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 6. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 7. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001. 8. Barry, L. Wound dressing Testing - BS EN 13726-1 Fluid Handling Capacity. Surgical Materials Testing Laboratory, Bridgend, United Kingdom Report No: 10/3299/1

Meer informatie op www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland, Tel. +31 76 521 96 63
Mölnlycke, Mepilex en Safetac zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care
© 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. NLWC00261708


Mölnlycke®