


Superioridad en la gestión del exudado

- ✓ Eficacia en la gestión de todo tipo de exudados^{1,2}
- ✓ Mayor capacidad de absorción frente a otras espumas del mercado^{3,4}
- ✓ Rápida absorción, incluso para los exudados viscosos^{1,2,5}



Gestiona todo tipo de exudado

Apósito de espuma absorbente con canales de absorción integrados que permiten una rápida transferencia del exudado al cuerpo de absorción.

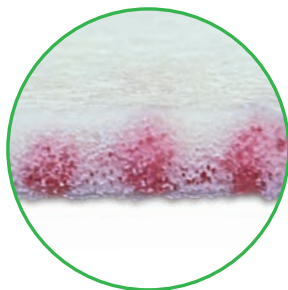

1. Mölnlycke Health Care data on file, report 20130104-004. 2. Mölnlycke Health Care data on file, report 20130515-001. 3. SMTL TM-390 & TM-404 Fluid Handling Capacity & Free Swell Absorption Capacity report 20130123-006. 4. SMTL TM-390 & TM-404 Fluid Handling Capacity & Free Swell Absorption Capacity report 20130729-001. 5. Mölnlycke Health Care data on file, report 20120815-004.

Los apósitos con Safetac* ofrecen mejores resultados.

Safetac, exclusiva de Mölnlycke Health Care, ofrece óptimos resultados. Acelera el proceso de cicatrización de las heridas y previene la aparición de nuevas. Los apósitos con Safetac son la opción más segura para los pacientes, aportándoles los estándares más altos en el cuidado de las heridas. Nuestro nivel y volumen de evidencia respalda los beneficios clínicos y económicos de los apósitos con Safetac, incluyendo Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® y Mepitac®**. Los apósitos con Safetac han ayudado a millones de pacientes en todo el mundo.

*Tecnología única y exclusiva de Mölnlycke Health Care
**www.molnlycke.es

Safetac
TECHNOLOGY

Mepilex® XT Safetac TECHNOLOGY

ESPUMA DE POLIURETANO CON **CANALES DE ABSORCIÓN**



C.N.	Tamaño cm
486902	10 x 10
486910	15 x 15
494039	10 x 20

Mepilex® Talon Safetac TECHNOLOGY

ESPUMA DE POLIURETANO ABSORBENTE PARA EL TALÓN



C.N.	Tamaño cm
400105	13 x 21

Mefix®

TELA AUTOADHESIVA



C.N.	Tamaño cm
499822	10 x 10

Tubifast™ WITH 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY

VENDAJE TUBULAR LIGERO



C.N.	Color e indicaciones	Tamaño cm x m
316209	Línea ROJA - Miembros pequeños	3,5 x 1
316490	Línea VERDE - Miembros pequeños/medianos	5 x 1
316205	Línea AZUL - Miembros grandes	7,5 x 1
316204	Línea AMARILLA - Miembros muy grandes	10,75 x 1
316207	Línea PÚRPURA - Tronco grande adulto	25 x 1

molnlycke_spain

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Avenida de la Vega 15, Edif. 3 - 3ª Planta.
Tel: +34 91 484 13 20
Mölnlycke Health Care, Mepilex®, Mefix y Tubifast® son marcas, nombres y logos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care.
© 2017. Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.

Mölnlycke

Guía de aplicación Mepilex® XT Safetac TECHNOLOGY



Mölnlycke

ESWC0032.2

Mepilex® XT

Safetac
TECHNOLOGY

APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON CANALES DE ABSORCIÓN



Film posterior de poliuretano, barrera frente a virus y bacterias*

• Permite la evaporación de la humedad para un control eficaz del exudado.

* Microbios > de 25 nm



Cuerpo absorbente con canales de absorción

- Gestión de exudado superior
- Canales de absorción diseñados para gestionar exudados viscosos
- Espuma flexible. Se adapta a los contornos del cuerpo.

Capa con Safetac®

- Atraumático en los cambios de apósito.
- No se adhiere al lecho húmedo de la herida.
- Minimiza el riesgo de maceración.



Tubifast™
WITH
2-WAY STRETCH™
TECHNOLOGY



Mefix®



Dedos

Indicaciones:

- Cirugía del dedo



Entre los dedos

Indicaciones:

- Para heridas difíciles entre los dedos



Codo

Indicaciones:

- Prevención U.P.P.
- Post-tratamiento de bursitis



En el primer dedo

Indicaciones:

- Heridas/ Úlceras
- Uñas encarnadas
- Tras retirada de uñas



Oreja

Indicaciones:

- Heridas alrededor de la oreja
- Prevención U.P.P.



Axila

Indicaciones:

- Nódulos linfáticos
- Heridas exudativas



Mano

Indicaciones:

- Heridas en contractura, en la palma o nudillos



Talón

Indicaciones:

- Talonera
- Protección ampollas
- Prevención U.P.P.



Tubos y catéteres

Indicaciones:

- Drenajes y catéteres suprapúbicos
- Fijación alrededor de zona suturadas con grapas

