

Veress kanyle

Truly customised laparoscopic solutions




Mölnlycke® Veress kanyle er et sterilt, engangsprodukt, der bruges til at skabe et pneumoperitoneum i forbindelse med laparoskopiske indgreb.

- Skarp affaset spids giver nem og sikker gennemboring af bugvæggen
- Transparent håndtag med klar rød visuel positionsindikator
- Fjederbelastet nål giver et mærkbart og tydeligt klik til sikring af korrekt placering
- Når nålen er trængt gennem bugvæggen, beskytter en glat afskærmning den affasede spids
- High-flow roterende insufflationsventil med luer lock-tilslutning til sammenkobling med insufflationsslangen
- Leveres i to længder – 120 mm og 150 mm
- Stump spids med præcist placeret distal insufflationskanal til kontrolleret insufflation
- Tilgængelig både som enkeltpakket produkt og til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker



Spidsen af veress kanyle

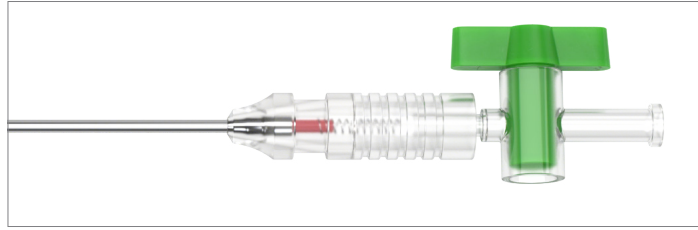

Veress kanyle

Varenr.	Beskrivelse	Længde	Pakning*
899105	Veress kanyle	12cm	25/500
899106	Veress kanyle	15cm	25/500

*inderæske/transportkarton

Lovlig producent: Unimax Medical Systems Inc.

Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.dk
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
© 2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU1082011

Mölnlycke[®]