


Mölnlycke® Aiguille de Veress


Solutions de cœlioscopie personnalisées

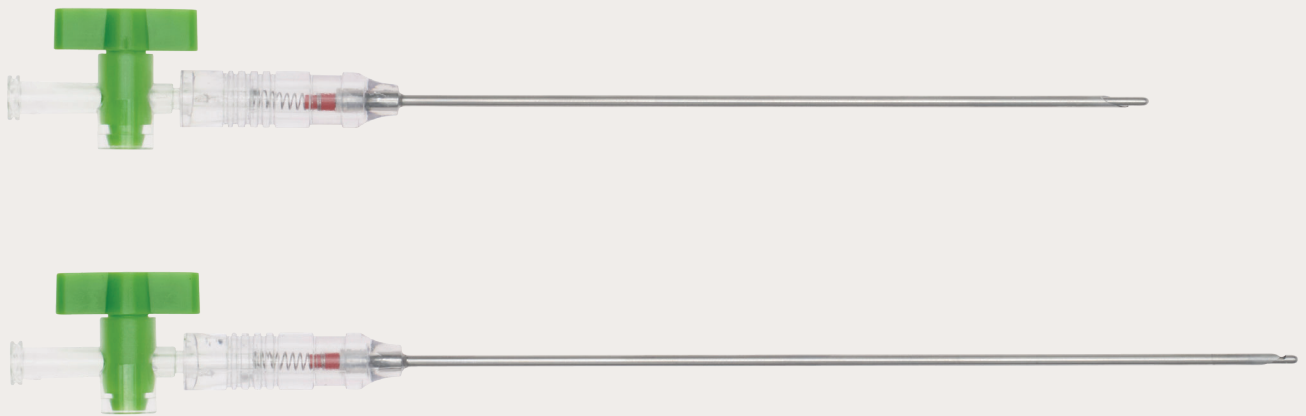

Une aiguille de Veress sert à créer un pneumopéritoine pendant une intervention de cœlioscopie.

- Pointe biseautée acérée pour une pénétration simple et sûre dans la paroi abdominale
- Poignée transparente avec indicateur rouge de position
- Stylet à ressort émettant un clic audible afin de garantir un positionnement précis
- Une fois que l'aiguille a pénétré dans les tissus abdominaux, celle-ci est afin de ne pas endommager les organes adjacents
- Robinet rotatif à haut débit avec raccord de Luer lors de la connexion au tube d'insufflation
- Disponible en deux longueurs – 120mm et 150mm
- Tête émoussée avec canal d'insufflation distal positionné avec précision pour une insufflation sûre et contrôlée

Disponible en emballage individuel stérile ou en tant que composant des trousse composites Mölnlycke®

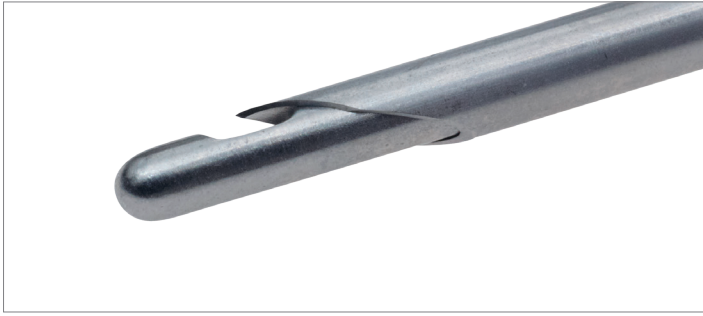

Pointe de l'aiguille de Veress



Corps de l'aiguille de Veress

N° de réf.	Description	Longueur	Pièces/disp.
899105	Aiguille de Veress 120mm	120mm	25
899106	Aiguille de Veress 150mm	150mm	25

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél: 03 286 89 50, Fax: 03 286 89 52.

Le nom et le logo de Mölnlycke sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00601709)

