

Trocarts

Solutions de cœlioscopie personnalisées



Une gamme complète de trocars ergonomiques, assurant un accès aisé et sûr dans la cavité péritonéale.

- Canule transparente et nervurée pour une bonne visualisation des instruments et une fixation efficace sur la paroi abdominale
- Disponible en emballage individuel stérile ou en tant que composant des trousse composites Mölnlycke®
- Joint universel robuste compatible avec des instruments de 5-12mm* et qui assure le maintien du pneumopéritoine

* pour le trocart de 12mm de diamètre.



Trocart à lame protégée




Trocart sans lame à dilatation



Trocart optique – poignée pistolet




Trocart optique

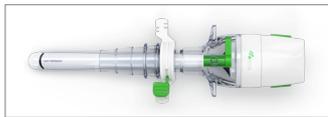


Trocart de Hasson



Canule universelle

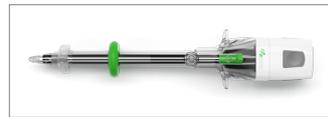

Trocart optique ballon

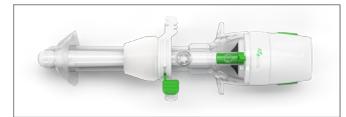

Trocart Hasson ballon

Trocart à lame protégée

Équipé d'une lame linéaire acérée et d'un mécanisme de protection simple et intuitif pour éviter d'endommager involontairement des tissus, surtout en cas de placement « à l'aveugle ».

- Lame linéaire acérée limitant la force d'insertion requise et réduisant la brèche fascia
- Largeur de lame réduite pour minimiser la lacération et optimiser la dilatation des tissus

Trocart sans lame à dilatation

Conçu pour séparer les tissus plutôt que de les lacérer, réduisant la brèche fascia par rapport aux modèles à lame et limitant les contraintes de suture.

- Minimise la lésion au niveau de la zone d'insertion et favorise une cicatrisation rapide
- Limite l'apparition de hernie au niveau de la zone d'insertion

Trocart optique

Un trocart qui permet une visualisation directe des couches de la paroi abdominale pendant l'insertion, réduisant les risques de lésion pendant le placement du trocart.

- Pour une entrée sécurisée dans la cavité péritonéale
- Tête à dilatation minimisant le traumatisme au niveau de la zone d'insertion et les risques de hernie post-opératoire

Trocart de Hasson

Les trocarts de Hasson sont destinés aux chirurgiens choisissant une ouverture sécurisée lors du placement du trocart.

- Tête émoussée évitant d'endommager involontairement des viscères pendant l'insertion
- Dimension de la canule rapidement ajustable via le dispositif de fixation simple et efficace

Canules universelles

Compatibles avec tous les obturateurs de même taille (à lame protégée, sans lame, optiques) pour un gain de temps au niveau des commandes, du stockage et des coûts.

Trocarts à ballonnet

- Offrent une fixation de la canule atraumatique avancée dans la paroi abdominale, de sorte que la canule reste en place, même pendant des procédures prolongées et de nombreux changements d'instruments.
- Minimisent la pénétration dans la cavité abdominale à travers la canule, conduisant à un plus grand espace de travail pour le chirurgien, tout en maintenant le pneumopéritoine.

N° de réf.	Description	Diamètre	Longueur	Pièces/disp.
899300	Trocart à lame protégée	5mm	70mm	5
899301	Trocart à lame protégée	5mm	100mm	5
899302	Trocart à lame protégée	11mm	100mm	5
899303	Trocart à lame protégée	11mm	150mm	5
899304	Trocart à lame protégée	12mm	100mm	5
899305	Trocart à lame protégée	12mm	150mm	5
899308	Trocart sans lame à dilatation	5mm	70mm	5
899309	Trocart sans lame à dilatation	5mm	100mm	5
899310	Trocart sans lame à dilatation	11mm	100mm	5
899311	Trocart sans lame à dilatation	11mm	150mm	5
899312	Trocart sans lame à dilatation	12mm	100mm	5
899313	Trocart sans lame à dilatation	12mm	150mm	5
899336	Trocart sans lame à dilatation	15mm	100mm	5
899314	Trocart optique – poignée pistolet	11mm	100mm	5
899315	Trocart optique – poignée pistolet	12mm	100mm	5
899316	Trocart optique	5mm	70mm	5
899317	Trocart optique	5mm	100mm	5

N° de réf.	Description	Diamètre	Longueur	Pièces/disp.
899324	Trocart optique	5mm	150mm	5
899318	Trocart optique	11mm	100mm	5
899325	Trocart optique	11mm	150mm	5
899319	Trocart optique	12mm	100mm	5
899326	Trocart optique	12mm	150mm	5
899320	Canule universelle	5mm	70mm	5
899321	Canule universelle	5mm	100mm	5
899322	Canule universelle	11mm	100mm	5
899323	Canule universelle	12mm	100mm	5
899306	Trocart de Hasson	11mm	100mm	5
899307	Trocart de Hasson	12mm	100mm	5
899330	Trocart optique ballon	5mm	70mm	5
899327	Trocart optique ballon	5mm	100mm	5
899331	Trocart optique ballon	11mm	100mm	5
899328	Trocart optique ballon	12mm	100mm	5
899329	Trocart Hasson ballon	12mm	100mm	5

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél: 03 286 89 50, Fax: 03 286 89 52.

Le nom et le logo de Mölnlycke sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00591709)


Mölnlycke®