

Trocars


Laparoscopische oplossingen op maat




Een uitgebreid assortiment ergonomisch ontworpen trocars, voor eenvoudige en veilige toegang tot de buikholte.

- Transparante canule met retentieranden voor visualisatie van het instrument en doeltreffende retentie van de trocar in de buikwand
- Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays
- Robuuste universele afdichting, geschikt voor instrumenten van 5-12mm*, met behoud van het pneumoperitoneum

* Heeft betrekking op trocar met diameter 12mm.

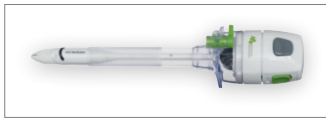

Afgeschermde trocar met lemmet

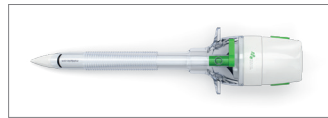


Bladeless trocar met dilaterende punt




Optische trocar – pistoolgreep




Optische trocar

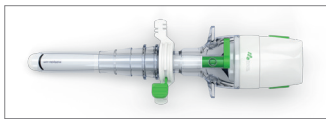


Hasson Trocar

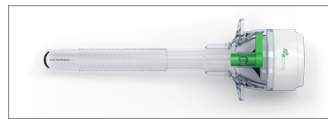

Universele canule

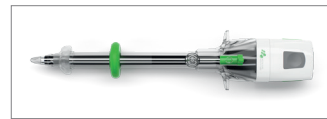

Optische ballontrocar

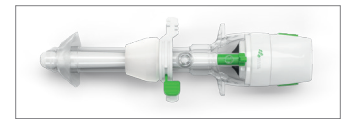

Hasson ballontrocar

Afgeschermde trocar met lemmet

Uitgerust met een scherp lineair lemmet en een eenvoudig intuïtief afschermingsmechanisme om onopzettelijke beschadiging van het weefsel te voorkomen, vooral bij het plaatsen van de 'blinde' primaire poort.

- Scherp lineair lemmet, zodat weinig kracht nodig is bij het inbrengen en fasciedefect wordt beperkt
- Smal lemmet, voor minimale weefselbeschadiging en optimale dilatatie van het weefsel

Bladeless trocar met dilaterende punt

Ontworpen om weefsel te scheiden en niet te snijden. Er treedt minder fasciedefect op dan bij trocars met lemmet, zodat er minder behoefte is aan fasciale sluiting.

- Beperkt letsel aan de trocaropening tot een minimum en bevordert een snelle genezing
- Beperkt hernatie aan de trocaropening

Optische trocar

Een zichtbare trocar maakt directe visualisatie van de buikwand mogelijk tijdens het inbrengen van de trocar. Het risico op letsels ten gevolge van het inbrengen van de trocar wordt zo verminderd, vooral bij het aanbrengen van de primaire poort.

- Zorgt voor een veilige toegang tot de buikholte

- Dankzij de dilaterende punt worden letsels aan de trocaropening en het risico op postoperatieve hernatie tot een minimum beperkt

Hasson trocar

Hasson trocars zijn ontworpen voor chirurgen die voor het aanbrengen van de primaire poort de veiligheid van de open techniek verkiezen.

- De stompe punt voorkomt onbedoelde schade aan de ingewanden tijdens het inbrengen
- De diepte van de canule kan snel worden aangepast via het eenvoudige en doeltreffende fixeeroonderdeel

Universele canules

Compatibel met alle obturators van dezelfde grootte (afgeschermde lemmet, zonder lemmet, optisch) voor optimale orders, opslag en kostenbesparingen.

Ballontrocars

- Bieden een geavanceerde atraumatische cannulefixatie in de buikwand, waardoor de canule op zijn plaats blijft zitten, zelfs bij langdurige ingrepen en veel instrumentenwissels
- Verklein de indringing in de buikholte door de canule, wat leidt tot een grotere werkruimte voor de chirurg, met behoud van het pneumoperitoneum

Ref. nr.	Beschrijving	Diameter	Lengte	Stuks/disp.
899300	Afgeschermde trocar met lemmet	5mm	70mm	5
899301	Afgeschermde trocar met lemmet	5mm	100mm	5
899302	Afgeschermde trocar met lemmet	11mm	100mm	5
899303	Afgeschermde trocar met lemmet	11mm	150mm	5
899304	Afgeschermde trocar met lemmet	12mm	100mm	5
899305	Afgeschermde trocar met lemmet	12mm	150mm	5
899308	Bladeless trocar met dilaterende punt	5mm	70mm	5
899309	Bladeless trocar met dilaterende punt	5mm	100mm	5
899310	Bladeless trocar met dilaterende punt	11mm	100mm	5
899311	Bladeless trocar met dilaterende punt	11mm	150mm	5
899312	Bladeless trocar met dilaterende punt	12mm	100mm	5
899313	Bladeless trocar met dilaterende punt	12mm	150mm	5
899336	Bladeless trocar met dilaterende punt	15mm	100mm	5
899314	Optische trocar – pistoolgreep	11mm	100mm	5
899315	Optische trocar – pistoolgreep	12mm	100mm	5
899316	Optische trocar	5mm	70mm	5
899317	Optische trocar	5mm	100mm	5

Ref. nr.	Beschrijving	Diameter	Lengte	Stuks/disp.
899324	Optische trocar	5mm	150mm	5
899318	Optische trocar	11mm	100mm	5
899325	Optische trocar	11mm	150mm	5
899319	Optische trocar	12mm	100mm	5
899326	Optische trocar	12mm	150mm	5
899320	Universele canule	5mm	70mm	5
899321	Universele canule	5mm	100mm	5
899322	Universele canule	11mm	100mm	5
899323	Universele canule	12mm	100mm	5
899306	Hasson Trocar	11mm	100mm	5
899307	Hasson Trocar	12mm	100mm	5
899330	Optische ballontrocar	5mm	70mm	5
899327	Optische ballontrocar	5mm	100mm	5
899331	Optische ballontrocar	11mm	100mm	5
899328	Optische ballontrocar	12mm	100mm	5
899329	Hasson ballontrocar	12mm	100mm	5

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.
De Mölnlycke merknaam, naam en logo zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00591709)

